

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

Bezoperacyjne rozwiązanie

Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki

2 nakładki Nipplette i 2 wkładki laktac.



SCF152/02



Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki sutkowe

Rezultaty potwierdzone klinicznie*

Nipplette™ pomaga mamom karmiącym piersią z płaskimi lub wklęsłymi brodawkami sutkowymi. To wyjątkowy i rewolucyjny przyrząd do bezoperacyjnej korekcji. Jest łatwy w użyciu i zapewnia trwałe rezultaty. Efekt korekcji można uzyskać już po kilku tygodniach stosowania.

Łatwe korzystanie i wygoda

- Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe
- Prosta obsługa
- Dodatkowe informacje

Prostota i dyskrecja – do każdego rozmiaru brodawki


- Najlepiej stosować przed zajściem w ciążę lub w ciągu pierwszych sześciu miesięcy ciąży.

Bezoperacyjna korekcja – delikatne ssanie

- Klinicznie potwierdzone rezultaty

Zalety

Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki

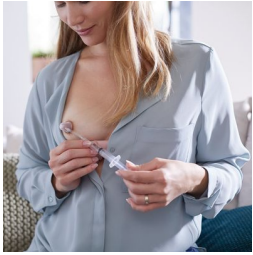


Problem wklęsłych lub płaskich brodawek sutkowych, który często wywołuje stres i utrudnia karmienie piersią, dotyczy ok. 10% kobiet. Po przystawieniu dziecka do piersi jego ssanie powinno wyciągnąć sutek. W przypadku problemów można skorzystać z prostego, komfortowego rozwiązania — nakładki Niplette™. Urządzenie to umożliwia kobietom z płaskimi lub wklęsłymi brodawkami wygodne karmienie piersią bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych zabiegów chirurgicznych*. Nakładka składa się z przezroczystego pojemnika w kształcie naparstka z uszczelką przymocowanego do zaworu i tłoka strzykawki.

Kiedy stosować Niplette

Niplette należy stosować przed zajściem w ciążę i nosić przez osiem godzin na dobę — w dzień lub w nocy*. Jeśli piersi nie są zbyt wrażliwe, można również korzystać z urządzenia przez pierwsze sześć miesięcy ciąży, co pozwoli uzyskać trwałą korekcję. Po narodzinach dziecka można używać Niplette przez kilka minut przed każdym karmieniem. Nakładka wyciągnie brodawkę sutkową, umożliwiając dziecku łatwe przysysanie się do piersi i ułatwiając karmienie piersią w ciągu pierwszych kilku dni po porodzie. Po zakończeniu karmienia piersią efekt korekcji może się cofnąć. W takim przypadku można wrócić do doraźnego stosowania Niplette.

Wykorzystuje delikatne ssanie

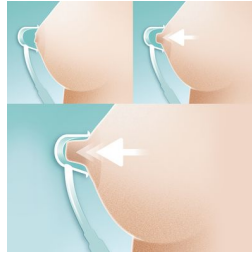

Założ pojemnik na otoczkę brodawki sutkowej i przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką naciśnij na tłok 5-mililitrowej strzykawki, aby zlikwidować próżnię i wyciągnąć brodawkę. Możesz kontrolować siłę zasysania. Po wyciągnięciu sutka odłącz strzykawkę od zaworu, a Niplette dyskretnie schowaj pod biustonoszem. Zalecamy stosowanie nakładki jeszcze przed zajściem w ciążę*.

Klinicznie potwierdzony sukces

Badania kliniczne* dotyczące stosowania Niplette potwierdziły uzyskanie trwałej korekcji płaskich lub wklęsłych brodawek sutkowych niezależnie od tego, czy wykształciły się one w okresie dojrzewania, czy w wyniku operacji zmniejszenia piersi. Wszystkie biorące udział w badaniu kobiety, które nie przeszły takiej operacji, z powodzeniem mogły karmić swoje dzieci piersią. Stałą korekcję można zwykle uzyskać po ciągłym stosowaniu nakładki przez okres od jednego do trzech miesięcy.

Dodatkowe informacje

Niplette nie będzie działać przy pełnym wypływie mleka. Jednak do tego czasu dziecko powinno nauczyć się skutecznie chwycić brodawkę sutkową.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Zawartość zestawu

Niplette: 2 szt.

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 2 szt.

Wykończenie

Dyskretny kształt

Etapy rozwoju

Etapy: Przed ciążą, 0–6 miesięcy, Początkowy etap karmienia piersią

Łatwa obsługa

Możliwość łatwego schowania pod ubraniem:

Wystarczy nacisnąć na tłok strzykawki, aby zlikwidować próżnię

Łatwe czyszczenie

Czyścić w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń

Funkcje

Sposób na płaskie brodawki: Wykorzystuje delikatne ssanie

Materiał

Niplette: Polipropylen

Wkładki laktacyjne: Produkt przetestowany dermatologicznie

