

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

900 serija **FlexCare**

**Įkraunamas
garsinis dantų
šepetukas**

HX6985

HX6983

HX6982

HX6942

HX6933

HX6932

HX6902

sonicare

garsinis dantų šepetukas

Atidžiai perskaitykite šias vartojimo instrukcijas prieš naudodamiesi įrenginiu ir išsaugokite jas, jeigu ateityje, naudodami įrenginį, iškiltų papildomų klausimų.

Pavojus

- Įkroviklį ir/arba valymo įrenginį laikykite atokiau nuo vandens. Nelaikykite jų ant arba šalia kriauklės, vonios, bidė ir pan. Nedėkite įkroviklio ir/arba valymo įrenginio į vandenį ar bet kokią kitą skystį. Po išvalymo įsitikinkite, kad įkroviklis ir/arba valymo įrenginys yra visiškai sausi ir tik tada prijunkite juos prie elektros lizdo.

Ispėjimas

- Prieš prijungiant prietaisą įsitikinkite, kad įtampa jūsų namuose ar vietoje, kurioje prijungsite įkroviklį ir/arba valymo įrenginį, atitinka įtampą, nurodytą įkroviklio ir/arba valymo įrenginio apačioje.
- Pagrindinis maitinimo laidas negali būti pakeistas. Jeigu maitinimo laidas yra sugadintas, atsikratykite įkroviklio ir/arba valymo įrenginio.
- Pagrindinis maitinimo laidas negali būti pakeistas. Jeigu maitinimo laidas yra sugadintas, atsikratykite įkroviklio ir/arba valymo įrenginio.
- Nenaudokite įkroviklio ir/arba valymo įrenginio lauke arba šalia įkaitusių paviršių.
- Jeigu koku nors būdu apgadinote įrenginį (šepetėlio galvutę, dantų šepetėlio rankena, įkroviklį ir/arba valymo įrenginį), nebesinaudokite juo. Šiame įrenginyje nėra taisomų dalių. Jeigu įrenginys yra sugadintas, susisieki su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje (skaitykite skiltį "Garantija ir aptarnavimas").
- Įrenginys nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurie turi fizinių, jutimo arba protinių negalių, arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, nebent tinkamai naudotis įrenginiu jie buvo išmokyti asmens, kuris yra atsakingas už ankščiau išvardintų asmenų saugumą.
- Vaikai turėtų būti išmokyti, kad šis įrenginys nėra skirtas žaidimams.
- Nutraukite naudojimąsi valymo įrenginiu, jeigu UV lemputė vis dar dega, kai durelės yra atidarytos. UV lemputė gali būti kenksminga žmonių akims ir odai. Valymo įrenginį visuomet laikykite tokioje vietoje, kad vaikai jo nepasiektų.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. (KENV). Visos teisės saugomos.

PHILIPS ir Philips logotipas yra KENV priklausantys registruoti prekiniai ženklai.

Quadpacer, Sonicare ir Sonicare logotipas yra Philips Oral Healthcare, Inc. Ir/arba KENV priklausantys prekiniai ženklai.

Apsaugota JAV ir tarptautinių patentų.

Kiti patentai laukia patvirtinimo.


Pavojus

- Šepetuko galvutės, rankenos, įkroviklio, įkroviklio dangtelio ir/arba valymo įrenginio niekuomet neplaukite indaplovėje.
- Jeigu per pastaruosius 2 mėnesius jūs darėtės burnos ar dantenų operaciją, tuomet prieš naudojantis šiuo dantų šepetuku pasitarkite su savo dantistu.
- Jeigu po dantų valymosi šiuo šepetuku jūs kraujuojate arba, jeigu po naudojimosi šepetuku vieną savaitę kraujavimas tęsiasi, tuomet pasikonsultuokite su savo dantistu.
- Sonicare dantų šepetukas atitinka elektromagnetinių įrenginių saugumo reikalavimus. Jeigu turite širdies stimuliatorių ar kitų implantuotų medicininių prietaisų, kreipkitės į savo gydytoją arba prietaiso gamintoją, prieš naudodami dantų šepetuką.
- Jeigu jūs turite medicininių klausimų, prieš naudodami Sonicare pasitarkite su savo daktaru.
- Šis įrenginys yra sukurtas dantų, dantenų ir liežuvio valymui. Nenaudokite jo kitiems tikslams. Jeigu jaučiatės nesmagiai arba patiriate skausmą, nebenaudokite šio įrenginio ir kreipkitės į savo daktarą.
- Sonicare dantų šepetukas yra asmeninės priežiūros įrenginys ir neturėtų būti naudojamas keliems pacientams odontologijos klinikoje ar kitose įstaigose.
- Nebenaudokite dantų šepetuko galvutės, kurios šereliai yra sulankstyti arba sugadinti. Šepetuko galvutę keiskite kas 3 mėnesius arba kas trumpesnį laiko tarpą, jeigu matote pirmus nusidėvėjimo požymius.
- Nenaudokite kitų šepetuko galvučių nei rekomenduojama gamintojo.
- Jeigu jūsų dantų pastoje yra peroksido, kepimo sodos arba hidrokarbonato (šių medžiagų pasitaiko balinančiose pastose), tuomet po kiekvieno naudojimo šepetuko galvutę išplaukite muilu ir vandeniu. Tai apsaugos plastiką nuo įskilimų.
- UV lemputė po valymo proceso ir jo metu yra įkaitusi. Nelieskite UV lemputės, kol ji yra karšta.
- Nenaudokite valymo įrenginio be apsauginio ekranėlio, norėdami išvengti sąlyčio su karšta lempute.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis Philips įrenginys atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) reikalavimus. Jeigu šiuo įrenginiu yra naudojamas tinkamai ir pagal šias naudojimosi instrukcijas, tuomet įrenginio naudojimas yra saugus pagal visus mokslinius tyrimus, kuriuos galima atlikti šiandien.

SONICARE

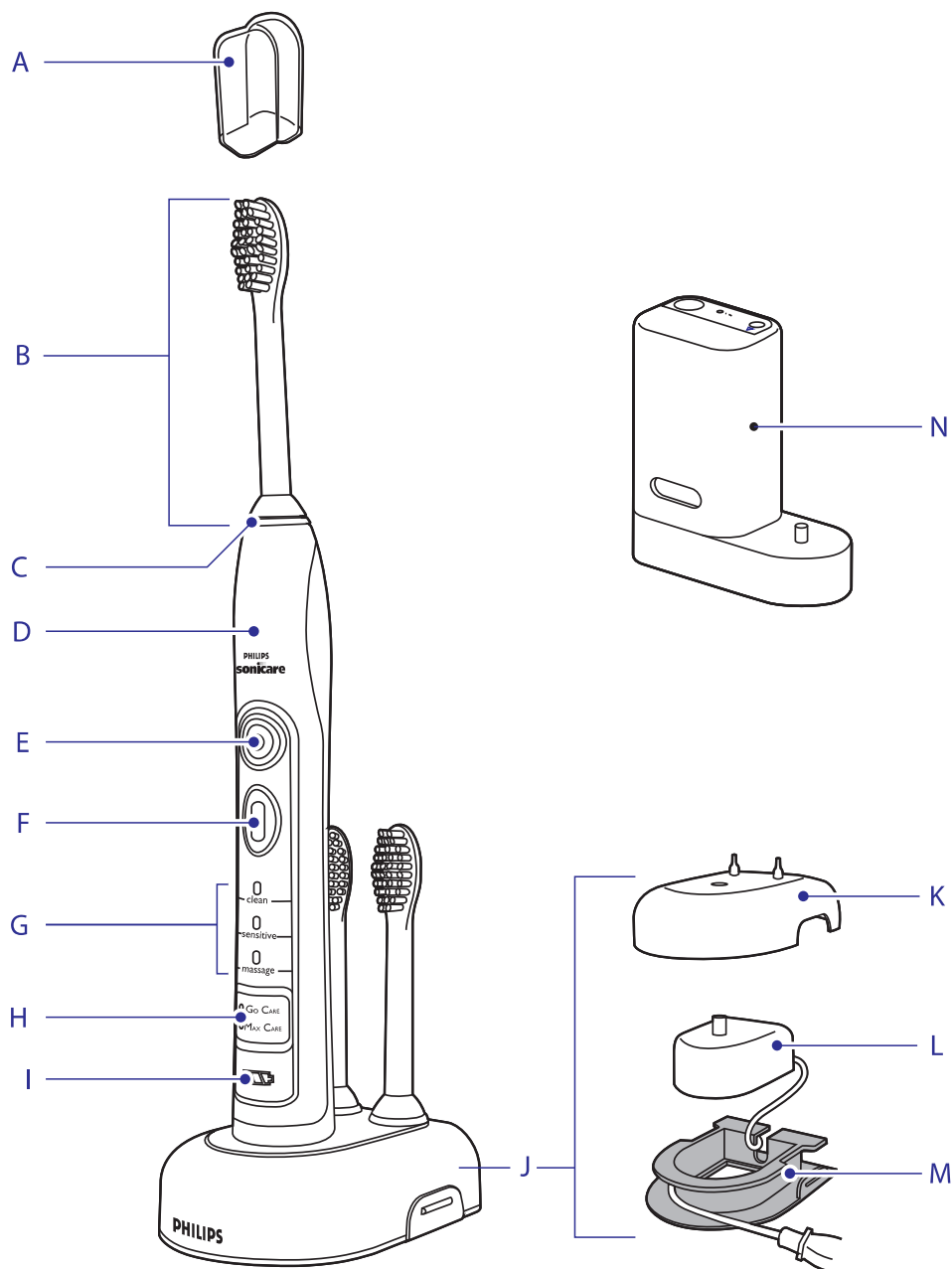

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI


Klausimas	Atsakymas
Kodėl neįsijungia valymo įrenginio lemputė?	Rozetė gali būti neveikianti. Elektros tiekimas rozetėse gali būti nutraukiamas tuomet, kai vonioje ar duše yra išjungiamas šviesa. Gali būti, kad reikia uždaryti valymo įrenginio dureles. Gali būti, kad reikia pakeisti UV lemputę (skaitykite skiltį 'Pakeitimas').
Kodėl dantų šepetuko galia valantis dantis mažėja?	Gali būti, kad jūs pasirinkote Max Care dantų valymo "rutiną". Jeigu taip ir yra, ši programa perjunginėja dantų šepetuką iš "Švaraus" (Clean) į "Masažinį" (Massage) režimą per visą 3 minučių dantų valymo ciklą. "Švarus" ir "Masažinis" režimai skleidžia skirtingą garsą ir valo dantis skirtingu šerelių judėjimu.
Ar man reikia specialaus pakrovėjo, jeigu aš vežuosi Sonicare dantų šepetuką į kelionę?	Patarimas keliaujant: Kelioninis įkroviklis, deluxe įkroviklis ir valymo įrenginys gali būti naudojamas visame pasaulyje, kur įtampa yra 100-240V AC, prie 50 arba 60Hz. Prireiks tik paprasto kištukinio adapterio.

Šiame skyriuje rasite atsakymus į klausimus, kurie apie šį įrenginį yra užduodami dažniausiai.

Jeigu negalite rasti atsakymo į savo klausimą, susisiekite su Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje.

Klausimas	Atsakymas
Kodėl neveikia Sonicare dantų šepetukas?	Gali būti, kad reikia įkrauti Sonicare dantų šepetuką. Kraukite Sonicare dantų šepetuką bent 24 valandas.
	Gali būti, kad neveikia rozetė. Elektros tiekimas rozetėse gali būti nutraukiamas tuomet, kai vonioje ar duše yra išjungiamas šviesa.
	Gali būti, kad reikia iš naujo uždėti arba pakeisti šepetuko galvutę.
Kodėl aš jaučiu lengvą kutenimą, kai naudojuosi Sonicare dantų šepetuku?	Normalu, jeigu pirmus kartus naudojant Sonicare dantų šepetuką yra jaučiamas lengvas kutenimas/dirginimas. Kai priprasite prie dantų valymosi, naudojantis Sonicare, šis kutenimo jausmas sumažės.
Šepetuko galvutė daužosi į dantis. Ką man daryti?	Norėdami to išvengti, taisyklingai laikykite šepetuko galvutę, taip, kad šereliai būtų tiesiai ant dantenų linijos, pakreipti nedideliu kampu.
Kodėl sumažėjo dantų šepetuko galia?	Gali būti, kad reikia įkrauti Sonicare dantų šepetuką.
	Gali būti įjungta Easy-start funkcija. Išjunkite Easy-start funkciją (skaitykite skiltį 'Funkcijos').
	Gali būti, kad reikia pakeisti šepetuko galvutę.
Kodėl valantis dantis neveikia Asmeninio dantų valymosi ("Personalised Brushing") mygtukas?	Gali būti, kad jūs pasirinkote dantų valymo "rutiną". Jeigu taip ir yra, Asmeninio dantų valymosi ("Personalised Brushing") mygtukas yra neaktyvus (skaitykite skiltį 'Sonicare Naudojimas').

- A.** Higieninis dangtelis kelionėms
- B.** Šepetuko galvutė
- C.** Keičiamas spalvotas žiedelis
- D.** Rankenėlė su paminkštinimu
- E.** Įjungimo/išjungimo mygtukas
- F.** Asmeninio valymo mygtukas
- G.** Valymo režimai
- H.** Valymo "routines"
- I.** Deluxe įkroviklio indikatorius
- J.** Deluxe įkroviklis (tik tam tikruose tipuose)
- K.** Įkroviklio dangtelis su šepetuko galvutės laikikliu (tik tam tikruose tipuose)
- L.** Kelioninis įkroviklis
- M.** Įkroviklio bazė su laido suvyniojimo įrenginiu
- N.** UV valymo įrenginio bazė su integruotu įkrovikliu ir laido suvyniojimo įrenginiu (tik tam tikruose tipuose)
 - Neparodyta: UV lemputė
 - Neparodyta: Valymo įrenginio dėžutė vandeniui
 - Neparodyta: Apsauginis ekranėlis, skirtas UV lemputei

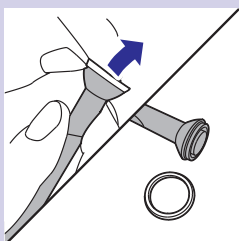


Spalvoto žiedelio pakeitimas

Sonicare šepetuko galvutės yra pažymėtos keičiamais spalvotais žiedeliais, kad galėtumėte lengviau atskirti, kuri galvutė yra jūsų.

Norėdami pakeisti žiedelio spalvą:


1. Patraukite spalvotą žiedelį iš šepetuko galvutės apačios.
2. Pritvirtinkite naują žiedą, padėkite vieną žiedo kraštą prie šepetuko galvutės apačios. Tuomet paspauskite kitą kraštą, norėdami įstatyti žiedą į vietą.

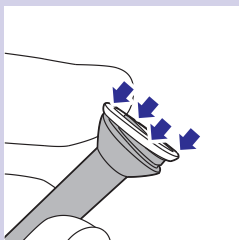

Šepetuko galvutės pritvirtinimas

1. Šepetuko galvutę dėkite taip, kad šereliai būtų nukreipti į rankenos priekį.
2. Tvirtai paspauskite šepetuko galvutę žemyn, kol ji sustos.

Pastaba: Tarp spalvoto žiedelio ir rankenos yra mažas tarpas.

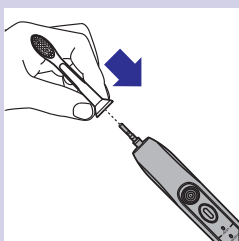

Sonicare įkrovimas

1. Įkiškite įkroviklio arba valymo įrenginio laidą į rozetę.
 2. Įstatykite dantų šepetuko rankeną į įkroviklį arba valymo įrenginį.
- Mirksinti lemputė ant baterijos indikatorius rodo, kad dantų šepetukas yra kraunamas.


Deluxe įkrovimo indikatorius:

Rodo įkrovimo baterijos likutį

- 3 žalios LED lemputės: 75-100%
- 2 žalios LED lemputės: 50-74%
- 1 žalia LED lemputė: 25-49%
- 1 geltona mirksinti LED lemputė: mažiau nei 25%

Pastaba: Jeigu jūsų Sonicare baterijos lygis yra žemas, jūs išgirsite 3 supypsėjimus ir matysite 1 LED lemputę baterijos indikatoriuje, kuri mirksės 30 sekundžių.

Pastaba: Norėdami, kad baterija visuomet būtų pilnai įkrauta, mes rekomenduojame laikyti Sonicare dantų šepetuką įkroviklyje arba valymo įrenginyje, kai juo nesinaudojate. Pilnai įkrauti bateriją užtrunka 24 valandas.

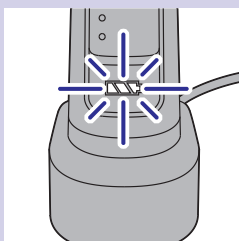


Jeigu jums reikia papildomos informacijos arba jūs susiduriate su problemomis, prašome aplankyti Philips tinklapį www.philips.com arba susisiekti su Philips Klientų Aptarnavimo Centru savo šalyje (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantiniame lapuke). Jeigu jūsų šalyje nėra Klientų Aptarnavimo Centro, tuomet susisiekite su oficialiu Philips platintoju savo šalyje.

Garantiniai apribojimai

Tarptautinė garantija negalioja:

- Šepetėlio galvutėms
- Sugadinimams, kurie buvo sukelti dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, nepriežiūros ar tam tikrų pakitimų.
- Esant įprastam nusidėvėjimui, taip pat įbrėžimams, įrėžimams, spalvos pasikeitimams ar nublukimams
- UV lemputei

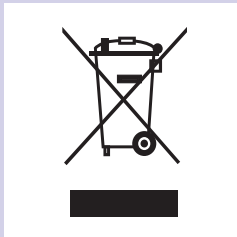

- Neišmeskite šio įrenginio su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis, o perduokite jį oficialiems elektroninių prekių perdirbėjams. Taip darydami, padėsite apsaugoti aplinką.
- Valymo įrenginio lemputėje yra gyvsidabrio, o tai yra medžiaga, kuri gali būti pavojinga tiek žmonėms, tiek aplinkai. Kai išimate lemputę, neišmeskite jos su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis, o perduokite ją oficialiems perdirbėjams.
- Integruotoje įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, kurios gali padaryti žalos aplinkai. Visuomet išimkite bateriją, prieš išmetant įrenginį ir perduokite jį oficialiems elektroninių prekių perdirbėjams. Bateriją nuneškite į artimiausią baterijų surinkimo vietą. Jeigu baterijos išimti jums nepavyksta, tuomet įrenginį galite nunešti į Philips aptarnavimo centrą. Aptarnavimo centro darbuotojai išims bateriją už jus ir atsikratys jos saugiu būdu, kuris nepadarys jokios žalos aplinkai.




Įkraunamos baterijos išėmimas

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šis procesas yra negrįžtamas.


1. Norėdami pilnai iškrauti bateriją, nuimkite rankeną nuo įkroviklio ar valymo įrenginio, įjunkite Sonicare dantų šepetuką ir leiskite jam veikti tol, kol jis išsikraus. Kartokite šį žingsnį tol, kol Sonicare dantų šepetukas nebeįsijungs.
2. Įdėkite plokščią (standartinį) atsuktuvą į skylutę, esančią rankenos apačioje. Pasukite atsuktuvą prieš laikrodžio rodyklę, norėdami atlaisvinti apatinį dangtelį.
3. Laikykite rankenos viršų nukreipę į apačią ir pastumkite į apačią, norėdami atlaisvinti vidinius rankenos komponentus.

4. Įdėkite atsuktuvą po plokštele, prie baterijos sujungimų ir pasukite, norėdami nutraukti sujungimus. Išimkite jungimo plokštelę ir ištraukite bateriją iš plastikinio dėkliuko.

Jokiu būdu nebejunkite įrenginio į rozetę, kai baterija yra išimta.

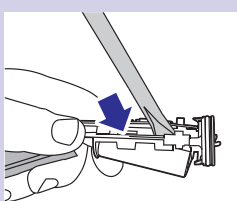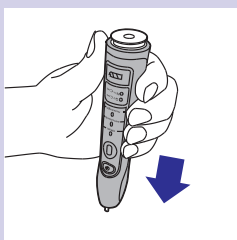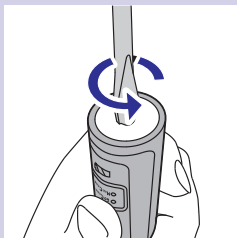


Dantų valymo instrukcijos

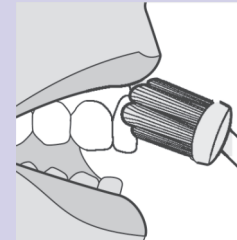


1. Sudrėkinkite šerelius ir uždėkite mažą kiekį dantų pastos.
2. Atremkite dantų šepetuko šerelius į dantis ir lengvai palenkite link dantenų linijos.
3. Spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, norėdami įjungti Sonicare.
4. Naudokite lengvą spaudimo lygį, norėdami, kad Sonicare dantų šepetukas būtų maksimaliai išnaudojamas ir valytų dantis už jus.
5. Švelniai ir iš lėto judinkite šepetuko galvutę per dantis, naudodami judesius, kurie šepetuką judintų pirmyn atgal, kad ilgesni šereliai pasiektų tarpdančius. Tęskite šiuos judesius viso dantų valymo metu.

Pastaba: Norėdami įsitikinti, kad dantis valote skirdami pakankamą dėmesį kiekvienai burnos daliai, naudokitės Quadpacer laiko indikatoriaus funkciją (skaitykite skiltį "Funkcijos").

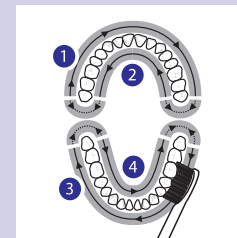

6. Pradėkite valyti dantis 1 burnos dalyje (išorinė viršutinių dantų pusė) ir valykite ją 30 sekundžių, tuomet pereikite prie 2 dalies (vidinė viršutinių dantų pusė). Tęskite dantų valymą 3 burnos dalyje (išorinė apatinių dantų pusė) ir valykite ją 30 sekundžių, tuomet pereikite prie 4 dalies (vidinė apatinių dantų pusė).
7. Baigus visą valymo ciklą, galite skirti papildomo laiko kramtomosios dantų dalies valymui, kur darosi dėmės. Taip pat galite valyti ir savo liežuvį su įjungtu arba išjungtu šepetuku, kaip jums labiau patinka.

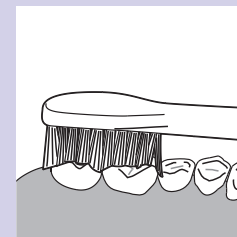

Jūsų Sonicare dantų šepetuką yra saugu naudoti:

- Nešiojant breketus (šepetuko galvutė susidėvi žymiai greičiau, kai naudojate breketais)
- Turint dantų restauracijas (plombas, karūnėles, padengtus blizgėsiu)

SONICARE NAUDOJIMAS

Asmeninis dantų valymo režimas

Sonicare dantų šepetukas automatiškai pradeda veikti iš anksto nustatytu Clean (Švariu) dantų valymo režimu. Norėdami nustatyti asmeninį dantų valymo režimą:

1. Prieš įjungiant Sonicare, spauskite Asmeninio dantų valymo (Personalised Brushing) mygtuką, norėdami perjungti tarp skirtingų dantų valymo režimų ar "rutinų".
- ▶ Žalia LED lemputė rodo pasirinktą režimą ar "rutiną".

Pastaba: Kai dantų šepetukas įjungiamas, galite perjungti valymo režimus, bet ne "rutinas". Programos turi būti pasirinktos prieš jį įjungiant įrenginį.

Valymo režimai

Clean (Švarus)

Standartinis režimas, naudojamas norint kokybiškai ir švariai išsivalyti dantis. (2 minutės).

Sensitive (Jautrus) režimas

Švelnus dantų valymo režimas, kuris skirtas asmenims, kurių dantenos ir dantys yra jautrūs.

Massage (Masažinis) režimas

Švelnus dantenų stimuliavimas.

Dantų valymo "rutinos"

Go Care programa


1-minutės dantų valymas Švariajame režime, norint greitai išsivalyti dantis. Kas 15 sekundžių išgirsite Quadpacer laiko indikatorius signalą.

Max Care programa

3-minučių dantų valymas ciklu, į kurį įeina Švarus ir Masažinis dantų valymo režimas, o visa tai vienoje programoje puikiai išvalys jūsų burną. 30 sekundžių Švariajame režime ir 15 sekundžių Masažiniame režime skirta kiekvienam burnos ketvirčiui. Kas 45 sekundes išgirsite Quadpacer laiko indikatorius signalą.

Pastaba: Kai Sonicare yra naudojamas klinikiniais tyrimams, turi būti pasirinktas įprastas 2-minučių Švarus režimas. Įrenginys turi būti pilnai įkrautas. Išjunkite Easy-start funkciją. Vietoms, kuriose matomos neįprastai gilios dėmės, galite skirti papildomas 30 sekundžių, kurios padės pašalinti dėmes.

VALYMAS

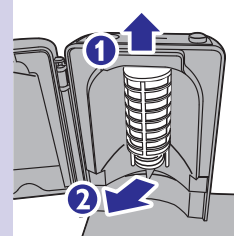

4. Nuimkite apsauginį stikliuką, esantį priešais UV lemputę. Norėdami nuimti stikliuką, švelniai jį pakelkite (1) ir ištraukite (2).
5. Išimkite UV lemputę. Norėdami išimti lemputę, suimkite ją ir ištraukite iš metalinio laikiklio.
6. Apsauginį stikliuką ir UV lemputę nuvalykite drėgna medžiagos skiautele.
7. Įdėkite atgal UV lemputę. Norėdami įdėti lemputę, įkiškite ją tiesiai į metalinį laikiklį, iš kurio ją išėmėte.
8. Įdėkite atgal apsauginį stikliuką. Norėdami įdėti stikliuką, nutaikykite laikiklius į stikliuko laikikliams skirtas skylutes, esančias šviesą atspindinčiame paviršiuje prie UV lemputės. Pastumkite ekraną į valymo įrenginio skylutes, skirtas stikliuko laikikliams.

LAIKYMAS

- Jeigu įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, atjunkite jį, išvalykite ir patalpinkite vėsioje, sausoje vietoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių. Norėdami laikyti tvarkingai supakuotą laidą, galite naudotis laido suvyniojimo įrenginiu.
- Dantų šepetuko galvutes galite laikyti tam skirtoje vietoje, įkroviklio gale (tik tam tikruose tipuose).


PAKEITIMAS

Šepetuko galvutė

- Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, Sonicare šepetuko galvutę keiskite kas 3 mėnesius.
- Naudokite tik tinkamas Sonicare dantų šepetuko galvutes.

UV lemputė

- Kitą UV lemputę galite užsisakyti iš oficialaus Philips Klientų Aptarnavimo Centro, esančio jūsų šalyje.

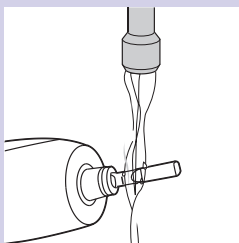

Šepetuko galvutę, rankenos, įkroviklio, įkroviklio dangtelio ir UV valymo įrenginio niekuomet neplaukite indaplovėje.

Dantų šepetuko rankena


1. Nuimkite šepetuko galvutę ir sudrėkinkite metalinį laikiklį su šiltu vandeniu.

Nestumkite guminės dalies ant metalinio laikiklio naudodamiesi aštriais daiktais, nes tai gali sugadinti įrenginį.

2. Naudokitės sudrėkinta medžiagos skiautele, norėdami nuvalyti rankenos paviršių.

Šepetuko galvutė

1. Sudrėkinkite šepetuko galvutę ir šerelius po kiekvieno naudojimo.
2. Nuimkite šepetuko galvutę nuo rankenos ir bent vieną kartą per savaitę nuplaukite šepetuko galvutės ir rankenėlės sujungimą šiltu vandeniu.

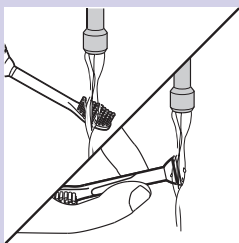

Kelioninis įkroviklis ir deluxe įkroviklis (tik tam tikri tipai)


1. Atjunkite įkroviklį.
2. Tik tam tikriems tipams: Išmontuokite įkroviklį ir išimkite kelioninį įkroviklį.
3. Naudokite sudrėkintą medžiagos skiautelę, norėdami nuvalyti įkroviklio paviršių.

Valymo įrenginys (tik tam tikri tipai)

Nevalykite valymo įrenginio, kai UV lemputė yra įkaitusi.

Norint pasiekti optimalų efektyvumo lygį, valymo įrenginį rekomenduojama valyti kas savaitę.

1. Atjunkite valymo įrenginį.
2. Ištraukite vandeniu skirtą skyrelį. Sudrėkinkite vandeniu skirtą skyrelį ir nuvalykite jį su drėgna medžiagos skiautele.
3. Nuvalykite visus šviesą atspindinčius paviršius su drėgna medžiagos skiautele.

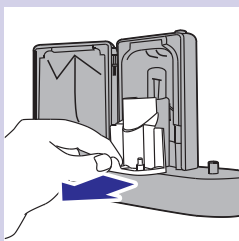

Easy-start

- Šis Sonicare dantų šepetuko tipas parduodamas su įjungta Easy-start funkcija.
- Easy-start funkcija iš lėto didina dantų valymo galią per pirmuosius 14 valymų, kad lengviau priprastumėte prie dantų valymosi su Sonicare.

Pastaba: Kiekvienas pirmųjų dantų valymų turi būti bent 1 minutės ilgumo, norint, kad burna priprastų prie dantų šepetuko.

Easy-start funkcijos įjungimas ir išjungimas

1. Prijunkite savo šepetuko galvutę prie rankenos.
2. Padėkite rankeną ant prijungto įkroviklio ar konteinerio.
 - Norėdami išjungti Easy-start funkciją: Spauskite ir nuspaudę palaikykite srovės įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes. Jūs išgirsite 1 pyptelėjimą, kuris rodo, kad Easy-start funkcija yra išjungta.
 - Norėdami aktyvuoti Easy-start funkciją: Spauskite ir nuspaudę palaikykite srovės įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes. Jūs išgirsite 2 pyptelėjimus, kurie rodo, kad Easy-start funkcija yra įjungta.

Pastaba: Easy-start funkcijos naudojimas po pripratimo laikotarpio yra nerekomenduojamas ir sumažina Sonicare dantų šepetuko efektyvumą naikinant akmenis.


Smartimer (Protingas laikmatis)

Smartimer parodo, kad jūsų dantų valymo ciklas yra baigtas, automatiškai išjungdamas dantų šepetuką, pasibaigus dantų valymo ciklui. Dantistai profesionaliai rekomenduoja valyti dantis ne mažiau nei 2 minutes, du kartus per dieną.

Quadpacer (Laiko indikatorius)

Quadpacer laiko indikatorius yra intervalinis laikmatis, kuris sukelia trumpą pyptelėjimą ir laikinai sustabdo dantų šepetuką, kad primintų jums, jog reikia išsivalyti visas keturias burnos puses ir tam skirti atitinkamai lygų laiko tarpą. Priklausomai nuo pasirinkto valymo režimo ar valymo "rutinos", Quadpacer laiko indikatorius pypsės skirtingais laiko intervalais viso valymo ciklo metu. Skaitykite skiltį 'Valymo režimai' arba 'Asmeninis dantų valymo režimas'. Šiame dantų šepetuko modelyje Quadpacer laiko indikatoriaus funkcija yra įjungta. Norėdami išjungti arba iš naujo įjungti Quadpacer laiko indikatoriaus funkciją:

1. Įstatykite rankeną su pritvirtinta šepetuko galvute į prijungtą įkroviklį.
2. Norėdami išjungti Quadpacer laiko indikatoriaus funkciją: spauskite ir nuspaudę 5 sekundes laikykite "Personalised Brushing" (asmeninio valymo režimo) mygtuką. Jūs išgirsite 1 pyptelėjimą, kuris rodo, kad Quadpacer laiko indikatoriaus funkcija yra išjungta.

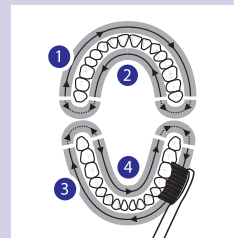

- ▶ Norėdami vėl įjungti Quadpacer laiko indikatorius funkciją: spauskite ir nuspaudę 5 sekundes laikykite "Personalised Brushing" (asmeninio valymo režimo) mygtuką, kol išgirsite 2 pyptelėjimus. Tai rodys, kad Quadpacer laiko indikatorius funkcija yra vėl įjungta.

Pastaba: Quadpacer laiko indikatorius negali būti išjungiamas iš anksto nustatytose Go Care ir Max Care dantų valymo "rutinose".

Laido suvyniojimo įrenginys (tik tam tikruose tipuose)

Jeigu jūsų Sonicare tipas yra toks, kad prie jo priklauso deluxe įkroviklio dangtelis ir bazė, tuomet kelioninis įkroviklis yra pridėtas dangtelyje. Jeigu norite sutrumpinti maitinimo laidą, galite dalį jo laikyti laido suvyniojimo įrenginyje, esančiame įkroviklio bazėje.

1. Norėdami atskirti įkroviklio dangtelį nuo įkroviklio bazės, spauskite dvi pilkas juosteles, esančias įkroviklio bazėje ir patraukite baltą įkroviklio dangtelį į viršų.
2. Apvyniokite laido perteklių aplink pilką įkroviklio bazę kaip nurodyta paveikslėlyje. Įsitinkite, kad laidą apvyniojote iš vidinės abiejų pilkų paspaudimo juostelių pusės.

3. Kai patalpinote laido perteklių, maitinimo laidą išveskite per mažą griovelį, esantį pilkos įkroviklio bazės gale.
4. Norėdami prijungti įkroviklio dangtelį, spauskite jį žemyn ant įkroviklio, kol jis atsidsurs reikiamoje vietoje.

Patarimas: Norėdami, kad kelionės metu būtų dar patogiau, galite nuimti kelioninį įkroviklį ir naudotis juo be įkroviklio dangtelio ir įkroviklio bazės.

Laido suvyniojimo įrenginys su integruotu įkrovikliu (tik tam tikri tipai)

- Jeigu jūsų dantų šepetuko tipas parduodamas kartu su valymo įrenginiu, nereikalingą laido dalį galite suvynioti valymo įrenginio apačioje.

- Su valymo įrenginiu jūs galite išvalyti savo šepetuką po kiekvieno panaudojimo.

Nutraukite naudojimąsi valymo įrenginiu, jeigu atidarius dureles neišsijungia UV lemputė, arba jeigu ant valymo įrenginio yra įskilęs Philips logotipas arba jo išvis nėra. UV lemputė gali būti pavojinga žmonių akims ir odai. Valymo įrenginį visuomet laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jeigu veikiant valymo įrenginiui matote svilimo dūmus ar jaučiate svilėsų kvapą, nedelsiant ištraukite valymo įrenginio laidą iš rozetės ir skambinkite Klientų Aptarnavimo Centrai.

1. Po dantų valymo sudrėkinkite šepetuką ir gerai nupurtykite perteklinį vandenį.

Valymo metu ant šepetuko nedėkite kelioninio dangtelio.

2. Norėdami atidaryti valymo įrenginio dureles, spauskite durelių atlaisvinimo mygtuką.

3. Šepetuko galvutę įstatykite į valymo įrenginį.
 - Įsitinkite, kad šepetuko šereliai yra nukreipti tiesiai į lemputę.

Pastaba: Į valymo įrenginį dėkite tik Sonicare ProResults šepetuko galvutę.

4. Įsitinkite, kad valymo įrenginys yra įjungtas į rozetę.

5. Uždarykite dureles ir spauskite žalią įjungimo/išjungimo mygtuką, tuomet pasirinkite UV valymo ciklą.

Pastaba: Valymo įrenginį galite įjungti tik tuomet, kai durelės yra tinkamai uždarytos.

Pastaba: Jeigu jūs atidarysite dureles valymo ciklo metu, valymo įrenginys sustos.

Pastaba: Valymo įrenginys veikia 10 minučių, tuomet automatiškai išsijungia.

- ▶ Valymo įrenginys veikia, kai dega mėlyna lemputė, esanti už Philips logotipo, o UV valymo LED lemputė iš lėto mirksi.
- ▶ Kai valymo ciklas yra baigtas, UV valymo LED lemputė dega žaliai, o valymo įrenginys automatiškai išsijungia.