

PHILIPS

sonicare

치간세정기 - 충전식

AirFloss

노즐 1개 포함



HX8211/02



치실을 사용하지 않으세요? 그렇다면 치간세정기 에어플로스로 규칙적인 치간세정을 시작해보세요.

칫솔이 닿지 않는 깊숙한 곳의 플라그를 한번에 제거

치실 사용을 불규칙적으로 하는 분들께 소닉케어 에어플로스는 건강한 치간 세정 습관을 배양할 수 있는 쉽고 간편한 방법입니다. 에어플로스는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 소닉케어만의 미세분사기술로 칫솔이 닿기 어려운 곳의 플라그를 제거하는데 도움이 됩니다.

30초 안에 이루어지는 구강케어

- 단 30초 만에 구강 전체 세정
- 원하는 위치에 대고, 누르고, 세정하세요!

건강한 구강 관리 습관 형성에 도움이 됩니다.

- 효율적인 치간 세정을 위한 간편한 방법

구강 건강 개선

- 우수한 치간 플라그 제거 효과
- 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 치간 충치 예방 효과

편리한 사용

- 공기와 물방울의 미세분사 기술
- 편안한 그립감을 위한 인체공학적인 핸들
- 가이드선 팁은 치간에 정확하게 위치를 잡을 수 있도록 도와줍니다.


주요 제품

공기와 물방울의 미세분사 기술



공기와 물방울의 미세분사 기술

쉽고 간편한 세정

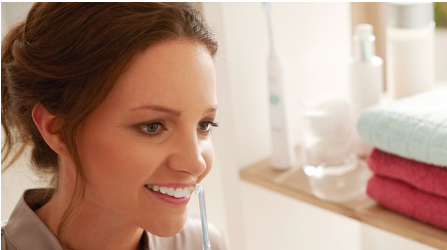

치간 세정은 구강 건강 관리에 있어 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있어 건강한 치간세정 습관을 기를 수 있습니다. 불규칙적으로 치실을 사용하던 사용자 중 96%가 에어플로스 3개월 사용 후 일주일에 4일 이상 에어플로스를 지속적으로 사용했습니다.


30초 세정



에어플로스를 사용하면 단 30초 만에 구강 전체를 세정할 수 있습니다. 작동버튼을 누르면 공기와 물 또는 구강세정액이 1회 분사됩니다. 노즐을 옆으로 이동하여 이 기능을 반복합니다. 새롭게 선보이는

자동 분사 기능을 사용하려면 동작버튼을 누른 상태에서 치아 사이로 가이드스 팁을 이동합니다. 그러면 1초마다 자동으로 분사됩니다.

잇몸 건강 개선

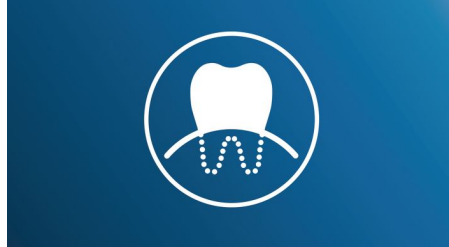

소닉케어 에어플로스는 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 보여 그 성능을 임상적으로 입증하였습니다.

채우기 쉬운 급수통



상쾌한 세정을 위해 핸들의 급수통에 구강 세정액 또는 물을 채운 후 원하는 위치에 대고 누릅니다. 급수통을 가득 채우시면, 최대 2회 사용하실 수 있습니다.

가이드스 팁



슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐과 가이드스 팁은 에어플로스가 정확한 위치에 놓여 치간세정을 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다.


니다. 가이드스 팁을 치아 사이에 안착됐다고 느낄 때까지 잇몸선을 따라 부드럽게 밀어 자리를 잡아주세요.

충치 예방 효과



소닉케어 에어플로스는 양치시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.

우수한 치간 플라그 제거 효과

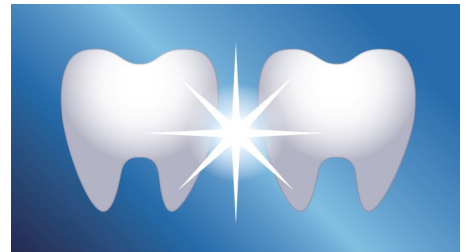

우수한 치간 플라그 제거 효과

인체공학적 핸들

에어플로스의 인체공학적 핸들과 미끄럼방지 핸들은 치아 틈새의 플라그 및 음식 잔여물을 쉽게 제거할 수 있도록 고안되었습니다.

사양

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

배터리 표시등: 충전 표시등이 노란색으로 깜빡이면 배터리가 부족한 것이므로 재충전해 주세요.

배터리 수명: 완전히 충전하면 최대 3주까지 사용 가능

노즐 액세서리: 간편한 탈부착

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간: 노즐은 6개월마다 교체

배터리 유형: 리튬 이온

충전 시간: 완전 충전 시 24시간 소요

소비전력

전압: 다중 전압 충전기

서비스

보증: 구입 후 2년

구성품

에어플로스 핸들: 1 개

에어플로스 노즐: 1 개

충전기: 다중 전압 충전기 1개

노즐 홀더: 1 개

세정 성능

성능: 5배 더 우수한 플라그 제거*

구강 건강 관리 효과: 단 2주 만에 잇몸 건강 개선

자동 분사 기능: 30초 내 구강 전체 세정

노즐: 최상의 효과를 위해 6개월마다 교체 권장

디자인 사양

색상: 하얀색에 녹색으로 강조

