

PHILIPS

sonicare

Skirtas tarpdantėms,
įkraunamas

AirFloss

su 1 antgaliu



HX8211/02



Nenaudojate siūlo? Naudokite „AirFloss“.

Pašalina apnašas, kurių nepasiekiate valydami šepetėliu.

Tiems, kurie nenaudoja siūlo reguliariai, „AirFloss“ yra lengviausias būdas išvalyti tarpdančius. „AirFloss“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; su unikalia oro ir mikrolašelių technologija pašalinsite apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.

Išsivalykite dantis per 30 sekundžių

- Visą burną išvalysite per 30 sekundžių
- Nukreipkite. Spauskite. Švaru!

Ugdykite sveiką įprotį

- Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes

Gerina burnos sveikatos būklę

- Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų
- Sveikesnės dantenos vos per dvi savaites
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

Paprasta naudoti

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Patogi ergonomiška rankenėlė
- Kreipiamuoju galiuku pasieksite reikiamą vietą


Ypatybės

Oro ir mikrolašelių technolog.



Oro ir mikrolašelių technologija

Lengva pradėti

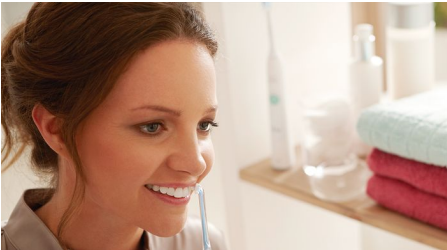

Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių, nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per savaitę.

Švara per 30 sekundžių



Naudodami „AirFloss“ visą burną išvalysite per 30 sekundžių. Jei norite paleisti vieną oro ir mikrolašelių srovę, spauskite mygtuką ir valykites, po to vėl kartokite šiuos veiksmus. Norėdami įjungti automatinį srovės režimą,

laikykite nuspaudę mygtuką ir kreipiamuoju galiuku slinkite iš vienos vietos į kitą. Įrenginys automatiškai kas sekundę paleis srovę.

Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad naudojant „Sonicare AirFloss“ dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites.

Lengvai pripildomas rezervuaras



Pripildykite rezervuarą burnos skalavimo skysčio arba vandens, nukreipkite į norimą vietą ir spauskite mygtuką. Rezervuaro turinio pakanka iki dviejų kartų.

Kreipiamasis galiukas




Naudodami ploną, kampu pakreiptą antgalį ir kreipiamąjį galiuką lengvai pasieksite reikiama vietą. Tiesiog slinkite danties paviršiumi šalia dantenų linijos, kol galiukas įsispraus į griovelį tarp dantų.

Padedą išvengti ertmių



Su „Sonicare AirFloss“ švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdantėse nesiformuos ertmės.

Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų

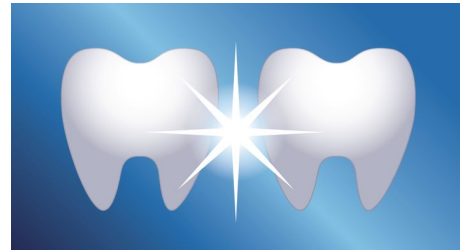

Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų

Ergonomiška rankenėlė

„AirFloss“ rankenėlė yra ergonomiška ir neslystanti, todėl lengvai manevruosite sunkiai pasiekiamose vietose.

Specifikacijos

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
Akumulatoriaus indikatorius: Mirksi: senka akumulatorius

Baterijos naudojimo laikas: Iki 3 savaitių, kai visiškai įkrauta

Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas: Pakeiskite antgalį kas 6 mėnesius

Baterijos tipas: Ličio jonų

Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Maitinimas

Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Pridėti priedai

„AirFloss“ rankenėlė: 1

AirFloss antgalis: 1

Įkroviklis: 1 kelių įtampų įkroviklis

Antgalio laikiklis: 1

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

Automatinis srovės režimas: Visą burną išvalysite per 30 sekundžių

Antgaliai: Norėdami geriausio rezultato, keiskite kas 6 mėn.

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Balta su žaliais akcentais

