



Philips
BlueControl

30 minutters behandling pr. plet

Bærbar blå lysbehandling
Klinisk dokumenteret effektivitet
Uden kemikalier eller kortison



PSK0202

Blå LED-lysbehandling.

Ændrer måden, du oplever psoriasisbehandling på.

Mød verdens første bærbare blå LED-lysbehandling til behandling af mild til moderat pletpsoriasis. Philips BlueControl er skånsom og uden UV-stråler. Med vores 90 dages returret kan du opleve behandlingens klinisk beviste effektivitet.*

Den første behandlingsform af pletpsoriasis med blåt lys

- Skånsom. Vær god mod din hud, imens du behandler pletpsoriasis.

Blid, UV-fri behandling uden kemikalier

- Effektiv. Oplev forandringen med psoriasisbehandling.

Lindring af pletpsoriasisssymptomer

- Praktisk. Oplev fantastiske resultater uden forstyrrelser i din hverdag.

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Praktisk



Takket være det innovative design af denne lille batteridrevne enhed kan du drage nytte af den klinisk efterprøvede blå LED-lysbehandling, imens du følger dine daglige rutiner.* Bare følg tre nemme trin, og du vil være klar til at behandle din psoriasis og komme videre med hverdagen: Start med at fastgøre Philips BlueControl til din arm eller dit ben med tekstilremmen. Tryk på knappen for at starte behandlingen. Anvend dagligt i 30 minutter per plet. Oplev blå LED-lysbehandling, og få effektiv lindring af pletpsoriasis symptomer såsom rødme, afskalning og fortykkelse uden brug af kemi eller den potentielle risiko fra UV-stråling.

Skånsom

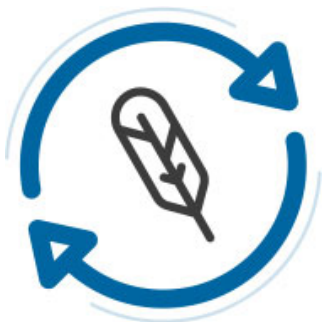

Blå LED-lysbehandling er UV-fri og skånsom for din hud.* Dette skånsomme alternativ giver effektiv

lindring uden behov for yderligere salver eller medicin. Det blå LED-lys fra Philips BlueControl igangsætter naturlige lindringsprocesser i din hud. Det hjælper med at kontrollere for hurtig cellevækst og inflammation og hjælper din hud til at regenerere ved normal hastighed – resulterende i lindring af pletpsoriasis symptomer som rødme, afskalning og fortykkelse.* Philips BlueControl er UV-fri og kemikaliefri – studier bekræfter, at det blå LED-lys i Philips BlueControl ikke er skadeligt for din hud.*

Effektiv



Bekæmp din psoriasis med dette innovative apparat. Du bør opleve en markant forbedring efter blot 30 minutters daglig behandling af din pletpsoriasis i mindst 4 uger.* Blå LED-lysbehandling med Philips BlueControl hjælper huden med at forny sig selv ved at nedsætte den for hurtige produktion af hudceller.* Philips BlueControl stimulerer hudens naturlige lindringsprocesser og mindsker derved pletpsoriasis symptomer såsom afskalning og rødmen. Terapiens effektivitet er klinisk dokumenteret.*

Specifikationer

Tilbehør

- USB-kabel: Genoplading
- Opladningsadapter: Genoplading
- Holder: Fastgørelse
- Oplader: Med stik til brug i Storbritannien og EU
- Nem at opbevare: Hårdt etui

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50 - 60 Hz
- Pærettype: LED
- Spænding: 100 - 240 V
- Strømforbrug: 5 W
- Batteri: Genopladelig
- Batteritype: Litiumion
- Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 4 behandlinger

Sikkerhed og regler

- CE 0344-certificeret
- UV-fri
- Klassificering af optisk udgang: Risikogruppe 1 (EN 60601-2-57)
- Effekttæthed: 200 mW/cm² (maks), 40 mW/cm² (gennemsnit)
- Maks. daglig dosis: 90 J/cm² pr. plet
- Medicinsk udstyr i klasse IIA
- MDD 93/42/EU

Logistiske data

- Oprindelsesland: Holland

Mål og vægt

- Produktmål: B/H/L: 77 x 23 x 125 mm
- Produktvægt: 165 gram

Bærbar

- Genopladeligt batteri
- Lille, kompakt design
- Strømadapter (EU og Storbritannien)

Design

- Enhedens farve: Hvid
- Remmens design: Grå og blå

Nem at anvende

- Behandlingstimer

Performance

- Klinisk dokumenteret
- Behandlingstid: 30 minutter pr. psoriasisplet

Service

- 90 dages returret
- Garanti: 2 års begrænset garanti



Udgivelsesdato
2019-07-25

Version: 9.0.1

12 NC: 8670 001 32907

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Philips BlueControl er CE-mærket medicinsk udstyr i klasse IIA, der er produceret i EU til behandling af psoriasis vulgaris. Enheden fås i øjeblikket ikke uden for EU. For den ordinerede medicin eller brug af enheden ændres, skal patienter rådføre sig med deres læge og læse brugervejledningen. August 2017.