

PHILIPS

AVENT

Niplette™

Uma abordagem não cirúrgica

Para mamilos achatados ou invertidos

1 Niplette e 2 absorventes para seios



SCF152/01



Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos

Resultados clinicamente comprovados*

O Niplette™ ajuda as mães com mamilos achatados ou invertidos a amamentar. Este instrumento exclusivo e revolucionário oferece uma solução fácil, duradoura e sem cirurgias. Em questão de semanas de uso contínuo, o mamilo ficará ereto.

Fácil e confortável

- Um dispositivo para mamilos achatados ou invertidos
- Um procedimento simples
- Informações adicionais

Simple e discreto: adequado para qualquer tamanho de mamilo


- Uso ideal antes ou durante os primeiros 6 meses de gravidez

Não cirúrgico e com sucção suave

- Resultados clinicamente comprovados

Destaque

Para mamilos achatados ou invertidos

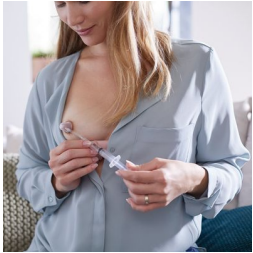


Mamilos invertidos ou contraídos afetam até 10% das mulheres, causando sofrimento psicológico e dificultando a amamentação para a mãe e o bebê. A ação de sucção do bebê deve liberar o mamilo. Caso contrário, o Nipplette™ é uma solução simples e confortável que pode ajudar. O dispositivo possibilita às mulheres com mamilos achatados ou invertidos amamentar confortavelmente sem a necessidade de uma cirurgia invasiva*. Consiste num molde de mamilo transparente com uma flange vedante, fixado a uma válvula e a uma porta para seringa.

Quando o uso é recomendado

Preferencialmente, o Nipplette deve ser usado antes da gravidez e por períodos de 8 horas durante o dia ou a noite*. Se os seios não forem muito sensíveis, também pode ser usado nos primeiros seis meses de gravidez, para obter uma correção permanente, ou após o nascimento do bebê, alguns minutos antes de cada amamentação. O Nipplette puxará o mamilo para fora para permitir que o bebê faça a pega com facilidade e ajudar a estabelecer a amamentação durante os primeiros dias. A correção cosmética permanente poderá, então, ser efetuada após o término da amamentação. Se for o caso, o Nipplette poderá ser aplicado novamente, de tempos em tempos.

Ação gentil de sugar

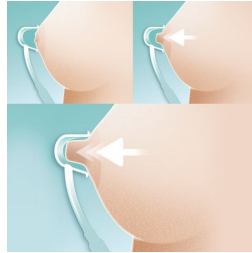

O copo é mantido sobre a aréola do mamilo com uma das mãos e o ar é retirado usando uma seringa de 5 ml para que o mamilo possa ser sugado. A usuária fica no controle da sucção e pode puxar o mamilo com toda a firmeza, mas de forma confortável. Após retirar o mamilo, separando com cuidado a seringa da válvula, a usuária pode continuar com suas atividades normais e manter o Nipplette dentro do sutiã, com toda a discrição. O uso inicial é estimulado sempre que possível*.

Sucesso clinicamente comprovado

Os ensaios clínicos* realizados no Nipplette provaram ser bem-sucedidos na obtenção de uma correção permanente de mamilos achatados ou invertidos, fosse em uma condição existente desde a puberdade ou como resultado de uma cirurgia de redução de seios. Desde que não tivessem sido submetidas a uma cirurgia mamária, mulheres grávidas preocupadas com a amamentação passaram a amamentar com sucesso. Uma correção permanente normalmente é obtida entre um e três meses de uso contínuo.

Informações adicionais

O Nipplette não funcionará quando o fluxo de leite vier integralmente. No entanto, nesse momento, o bebê já estará acostumado à pega do mamilo.

Especificações

O que está incluído

Nipplette: 1 pcs
Absorventes descartáveis para seio: 2 pcs

Design

Design discreto

Fases do desenvolvimento

Fase: Antes da gravidez, 0 a 6 meses, Fase inicial da amamentação

Fácil de usar

Fácil de esconder sob a roupa: Pressione a seringa para liberar vapor

Fácil de limpar

Lavagem em água quente com detergente

Funções

Solução para mamilos invertidos: Utiliza sucção confortável

Material

Nipplette: Polipropileno
Absorventes para seio: Dermatologicamente testado

