



Philips Avent
Inteligentny termometr
douszny

Łączność z aplikacją uGrow
Szybkie i dokładne działanie
Komfort i łatwość użycia



SCH740/01

Mierzy i zapisuje temperaturę dziecka

Dokładny i szybki termometr douszny połączony z aplikacją uGrow

Inteligentny termometr douszny Philips Avent umożliwia szybkie i dokładne zmierzenie temperatury oraz zapisanie odczytów bezpośrednio w urządzeniu przenośnym za pomocą aplikacji uGrow.

Łączność z aplikacją uGrow

- Część rodziny produktów połączonych z aplikacją uGrow
- Sprawdzaj temperaturę dziecka, aby lepiej ją zrozumieć
- Urządzenie łączy się z aplikacją uGrow przez Bluetooth® Smart

Szybkie i dokładne działanie

- Dokładny pomiar po 2 sekundach od naciśnięcia jednego przycisku
- Dokładność pomiarów wynosi $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $0,4^{\circ}\text{F}$
- Czerwony wskaźnik LED szybko informuje o wysokiej temperaturze
- Zapewnia wyniki pomiaru w stopniach Celsjusza i Fahrenheita

Komfort i łatwość użycia

- Produkt opracowany z myślą o łatwym i wygodnym pomiarze temperatury w uchu*



asimpleswitch.com

PHILIPS
AVENT

Zalety

Produkt połączony z aplikacją uGrow



Inteligentny termometr douszny Philips Avent łączy się aplikacją uGrow. To pierwsza na świecie aplikacja medyczna dotycząca dzieci, która po połączeniu z odpowiednimi urządzeniami zapewnia ważne wskazówki. Aplikacja uGrow może pomóc użytkownikom odkryć pewne schematy pozwalające wspierać zdrowy rozwój dziecka.

Sprawdzanie i zapisywanie




Inteligentny termometr douszny Philips Avent szybko i dokładnie mierzy temperaturę, a także zapisuje w aplikacji uGrow historię pomiarów, którą można w prosty sposób udostępnić lekarzowi.

Szybki



Czasami trudno jest wykonać dokładny pomiar temperatury, ponieważ dzieci są bardzo ruchliwe. Inteligentny termometr douszny Philips Avent opracowano myśląc o szybkości i łatwości użycia. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby po 2 sekundach odczytać wynik pomiaru temperatury.

Dokładny

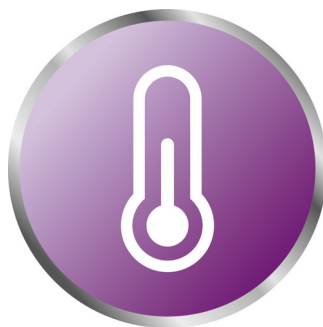

Temperaturę ciała można mierzyć w pięciu miejscach: w ustach, w uchu, pod pachą, na czole i w odbycie. Pomiar w uchu (czyli pomiar temperatury błony bębenkowej), wraz z pomiarem odbytniczym, jest najdokładniejszy.* Inteligentny termometr douszny Philips Avent mierzy temperaturę w uchu i zapewnia precyzyjne wyniki, którym można ufać. Nasze badania wykazały, że ten termometr zapewnia pomiary klasy medycznej z dokładnością do $\pm$

0,2°C / 0,4°F w zakresie 32,4–42,9°C (90,3–109,2°F). Pokazuje centralną ciepłotę ciała.*

Oznaczenie wysokiej temperatury



Inteligentny termometr douszny Philips Avent jest wyposażony w wyraźny wyświetlacz LCD, który pozwala łatwo sprawdzić, czy temperatura jest normalna*, czy podwyższona. Wskaźnik zmienia kolor na czerwony, jeśli temperatura wynosi 38,0°C (100,4°F) lub więcej.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Synchronizacja

- Przesyłanie danych: przez Bluetooth® Smart
- Zgodne telefony: iPhone 5s+ | iOS 8.1+ | Android 4.4+

Wzornictwo

- Kolor: Wybielanie
- Wymiary: 136 x 34,5 x 57 mm (dł. x szer. x gł.)
- Waga netto: Około 54,6 g

Łatwa obsługa

- Szybki: Pomiar w 2 sekundy
- Skala Celsjusza i Fahrenheita
- Wyraźny wyświetlacz LCD
- Końcówka sondy dla osób w każdym wieku
- Niezależne urządzenie: Tak — termometru dousznego można używać jako niezależnego

urządzenia

Dane

- Dokładność: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$) w zakresie $32,4\text{--}42,9^{\circ}\text{C}$ ($90,3\text{--}109,2^{\circ}\text{F}$)
- Zakres pomiaru: $32,4\text{--}42,9^{\circ}\text{C}$ ($90,3\text{--}109,2^{\circ}\text{F}$)
- Warunki działania: $10,0\text{--}40,0^{\circ}\text{C}$ ($50,0\text{--}104,0^{\circ}\text{F}$) i wilgotność względna 20–85%

Moc

- Źródło zasilania: 2 baterie AAA

Akcesoria

- 2 baterie AAA: nieprzeznaczone do ładowania

Serwis

- Dwuletnia gwarancja



Data wydania 2017-07-17

Wersja: 5.2.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Odzwierciedla wewnętrzną temperaturę ciała

* Źródła: Herzog, L., & Phillips, S. G. (2011). Addressing concerns about fever. *Clinical Pediatrics*, 50(5), 383–390.

* McCallum, L., & Higgins, D. (2011). Measuring body temperature. *Nursing Times*, 108(45), 20–2.

* Zakres normalnej temperatury różni się w zależności od grupy wiekowej. $38,0^{\circ}\text{C}$ ($100,4^{\circ}\text{F}$) to nadal normalna temperatura dla niemowląt.

* Chamberlain, J.M., et al., Determination of Normal Ear Temperature with an Infrared Emission Detection Thermometer, *Annals of Emergency Medicine*, January 1995, Vol. 25, ss. 15–20.