



„Philips Avent“
Išmanusis į ausį kišamas
termometras

Jungiama prie „uGrow“
Greitas ir tikslus
Patogus ir lengvai naudojamas



SCH740/01

Matuoja vaiko temperatūrą ir ją įrašo

Tikslus, greitas, prie „uGrow“ jungiamas į ausį kišamas termometras

Su „Philips Avent“ išmaniuoju į ausį kišamu termometru greitai ir tiksliai pamatuosite temperatūrą, o naudodami „uGrow“ programą duomenis išsaugosite tiesiai išmaniajame prietaise.

Jungiama prie „uGrow“

- Gaminių grupės, jungiamos prie „uGrow“, dalis
- Sekite ir geriau nusimanykite apie vaiko temperatūrą
- Prijunkite per „Bluetooth® Smart“ prie „uGrow“ programos

Greitas ir tikslus

- Vienas paspaudimas ir per 2 sek. pamatysite tikslus rodmenis
- Tikslūs rezultatai $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$
- Raudonas LED žiedas – greita aukštos temperatūros indikacija
- Rezultatai teikiami pagal Celsijaus ir Farenheito skales

Patogus ir lengvai naudojamas

- Skirtas lengvai ir patogiai temperatūrai matuoti ausyje*

Ypatybės

Prie „uGrow“ jungiamas gaminys



„Philips Avent“ išmanųjį į ausį kišamą termometrą galima prijungti prie mūsų „uGrow“ programos. Tai pirmoji pasaulyje medicininė kūdikiams skirta programa, prie kurios prijungiami prietaisai ir kuri teikia svarbius, asmeninius patarimus. Leiskite „uGrow“ jums padėti atrasti būdus, kurie palengvins sveiką mažylio raidą.

Sekite ir įrašykite




„Philips Avent“ išmanusis į ausį kišamas termometras greitai ir tiksliai matuoja temperatūrą bei kuria kūno temperatūros istoriją „uGrow“ programoje, kad galėtumėte lengvai ją pasidalyti su gydytoju.

Greit.



Norint gauti tikslūs rodmenis, gali būti sunku pakankamai ilgai išlaikyti vaiką ramų. Ši problema išsprendžiama su „Philips Avent“ išmaniuoju į ausį kišamu termometru, nes jį naudoti greita ir paprasta. Tik vienas mygtuko paspaudimas ir rodmenis pamatysite per 2 sekundes.

Tikslus

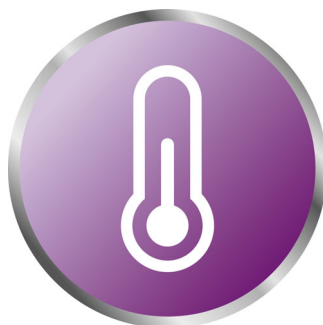

Kūno temperatūrą galima matuoti penkiose vietose: burnoje, ausyje, pažastyje, ant kaktos ir tiesiojoje žarnoje. Tiksliausias būdas yra matuoti ausyje (dar žinomas kaip būgnelio matavimas) bei tiesiojoje žarnoje.* Su „Philips Avent“ išmaniuoju į ausį kišamu termometru temperatūra matuojama ausyje ir gaunami tikslūs, patikimi rodmenys. Mūsų tyrimas parodė, kad su šiuo termometru gaunami medicininio lygio matavimai su $\pm 0,2$ °C arba $\pm$

0,4 °F paklaida diapazone nuo 32,4 °C iki 42,9 °C (90,3 °F–109,2 °F). Rodo vidinę kūno temperatūrą.*

Aukštos temperatūros indikacija



„Philips Avent“ išmanusis į ausį kišamas termometras turi ryškų LCD ekraną, tad galite iškart matyti, ar temperatūra yra normali*, ar padidėjusi. Žiedas užsidega raudonai, jei temperatūra pasiekia 38,0 °C (100,4 °F) ir daugiau*.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Sinchronizavimas

- Duomenų perkėlimas: per „Bluetooth® Smart“
- Suderinamumas su telefonu: „iPhone 5s+“ | „iOS 8.1+“ | „Android 4.4 +“

Konstrukcija

- Spalva: Balta
- Matmenys: 136 (l) x 34,5 (b) x 57 (d) mm
- Grynas svoris: Apie 54,6 g

Lengva naudoti

- Greit.: 2 sek. matavimas
- Perjunkite į Celsijaus ir Farenheito skales
- Ryškus LCD ekranas
- Galiukas su zonu tinkama bet kokio amžiaus žmogui
- Autonominis prietaisas: Taip, į ausį kišamą termometrą galima naudoti kaip autonominį

prietaisą

Techninės

- Tikslumas: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$), kai diapazonas yra nuo $32,4^{\circ}\text{C}$ iki $42,9^{\circ}\text{C}$ ($90,3^{\circ}\text{F}$ – $109,2^{\circ}\text{F}$)
- Matavimo skalė: $32,4^{\circ}\text{C}$ – $42,9^{\circ}\text{C}$ / $90,3^{\circ}\text{F}$ – $109,2^{\circ}\text{F}$
- Veikimo aplinka: $10,0^{\circ}\text{C}$ – $40,0^{\circ}\text{C}$ ($50,0^{\circ}\text{F}$ – $104,0^{\circ}\text{F}$), kai santykinė drėgmė yra 20 %–85 %

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 2 x AAA neįkraunamos baterijos

Priedai

- 2 x AAA baterijos: neįkraunamos

Techninė priežiūra

- Dvejų metų garantija



Išleidimo data 2017-12-15

Versija: 5.2.1

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Rodo vidinę kūno temperatūrą

* Šaltiniai: Herzog, L. ir Phillips, S. G. (2011 m.). Apie nerimą dėl karščiavimo. „Clinical Pediatrics“, 50(5), 383–390.

* McCallum, L. ir Higgins, D. (2011 m.). Kūno temperatūros matavimas. „Nursing Times“, 108(45), 20–2.

* Normalios temperatūros diapazonas skiriasi priklausomai nuo amžiaus grupės. $38,0^{\circ}\text{C}$ ($100,4^{\circ}\text{F}$) vis dar priklauso normalios kūdikių temperatūros diapazonui.

* Chamberlain, J.M., et al., Normalios temperatūros ausyje nustatymas su infraraudonųjų spindulių termometru. „Annals of Emergency Medicine“, 1995 m. sausis, t. 25, psl. 15–20.