



Philips Avent
Viedais ausu termometrs

Savienojams ar uGrow aplikāciju

Ātrs un precīzs
Ērti un viegli lietojams



SCH740/01

Mēra un reģistrē jūsu bērna ķermeņa temperatūru

Precīzs, ātrs, ar uGrow aplikāciju savienojams ausu termometrs

Philips Avent viedais ausu termometrs ātri un precīzi nosaka ķermeņa temperatūru un tieši saglabā rādījumus jūsu viedierīcē, izmantojot uGrow aplikāciju.

Savienojams ar uGrow aplikāciju

- Ietilpst produktu grupā, kam iespējama savienošana ar uGrow aplikāciju
- Mēriet jūsu bērna ķermeņa temperatūru un gūstiet labāku izpratni par to
- Savienojams ar uGrow aplikāciju, izmantojot Bluetooth® Smart

Ātrs un precīzs

- Vienreiz nospiediet pogu un jau 2 sekunžu laikā iegūsi precīzu mērījumu
- Precīzi rezultāti: $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Sarkanas krāsas LED displeja aplis signalizē paaugstinātas temperatūras gadījumā
- Uzrāda rezultātus pēc Celsija un Fārenheita skalas

Ērti un viegli lietojams

- Ērtai un vieglai temperatūras mērīšanai ausī*



asimpleswitch.com

PHILIPS
AVENT

Izceltie produkti

Ar uGrow savienojama ierīce



Philips Avent viedais ausu termometrs ir savienojams ar mūsu uGrow aplikāciju. Pasaulē pirmā medicīniskā bērnu aplikācija, ar kuru savienojot ierīces, saņemat jums tik nozīmīgo informāciju. uGrow palīdzēs noskaidrot informāciju, kas ļaus rūpēties par jūsu mazuļa veselīgu attīstību.

Mēriet un reģistrējiet mērījumus



Philips Avent viedais ausu termometrs ātri un precīzi veic temperatūras mērījumus un saglabā ķermeņa temperatūras vēstures datus uGrow aplikācijā, lai jūs varētu tos uzrādīt ārstējošajam ārstam.


Ātrs



Var būt problemātiski nodrošināt, lai bērns pietiekami ilgi nekustētos un jūs varētu veikt

precīzu ķermeņa temperatūras mērījumu. Philips Avent viedais ausu termometrs atrisina šo problēmu, jo tas ir ātri un ērti lietojams. Nepieciešams tikai vienreiz nospiegt pogu, lai jau 2 sekunžu laikā iegūtu temperatūras mērījumu.

Precīzs

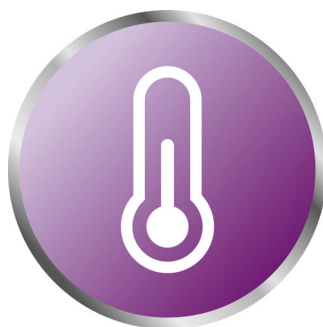


Ķermeņa temperatūru iespējams izmērīt piecās vietās: mutē, ausī, padusē, uz pieres un taisnajā zarnā (rektāli). Precīzākie mērījumi tiek iegūti ausī (t. s. timpāniskā temperatūra) un taisnajā zarnā.* Philips Avent viedais ausu termometrs mēra temperatūru ausī, nodrošinot precīzu mērījumu, par ko varat būt droši. Mūsu pētījumos ir pierādīts, ka šis termometrs nodrošina medicīniska līmeņa precizitātes mērījumus ar $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$) precizitāti temperatūras diapazonā no $32,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $42,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($90,3\text{ }^{\circ}\text{F}$ – $109,2\text{ }^{\circ}\text{F}$). Tas uzrāda ķermeņa pamata temperatūru.*

Paaugstinātas temperatūras rādījums



Philips Avent viedā ausu termometra dzidrais LCD displejs ļauj nekavējoties nolasīt temperatūras mērījumu un noskaidrot, vai tas atbilst normai* vai ir paaugstināts. Gaismas aplis iedegas sarkanā krāsā, ja temperatūra ir $38,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,4\text{ }^{\circ}\text{F}$) vai augstāka*.

Ērti un viegli lietojams

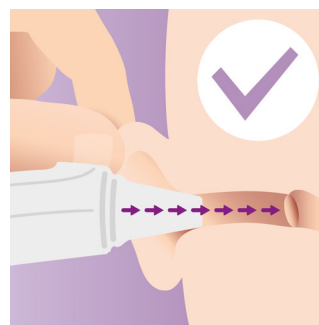

Philips Avent viedais ausu termometrs ātri un vienkārši veic jūsu bērna ķermeņa temperatūras mērījumus. Vispirms nodrošiniet, lai ierīces sensors būtu tīrs un sauss. Pēc tam nospiediet ieslēgšanas pogu un viegli pavirziet bērna ausi uz aizmuguri, lai auss kanāls būtu novietots taisni. Ievietojiet termometru ausī, pavēršot tā uzgali pret auss bungādiņu, un vēlreiz nospiediet ieslēgšanas pogu. Šī kompakta un ērti lietojamā termometra uzgali ir piemērots lietošanai jebkurā vecumā.



asimpleswitch.com

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO₂ izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Sinhronizēšana

- Datu pārsūtīšana: izmantojot Bluetooth® Smart
- Savienojamība ar tālruņiem: iPhone 5s+ | iOS 8.1+ | Android 4.4+

Dizains

- Krāsa: Balta
- Izmēri: 136 x 34,5 x 57 mm (G x P x Dz)
- Neto svars: Apm. 54,6 g

Vienkārša lietošana

- Ātrs: Mērījums 2 sekundēs
- Iespēja pārslēgt starp Celsija un Fārenheita skalu
- Dzidrs LCD displejs
- Uzgalis piemērots lietošanai jebkurā vecumā
- Autonoma ierīce: Jā, šo ausu termometru var izmantot kā autonomu ierīci

Tehniskās

- Precizitāte: $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$) temperatūras diapazonā no $32,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $42,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($90,3\text{ }^{\circ}\text{F}$ – $109,2\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Mērījumu diapazons: $32,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $42,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $90,3\text{ }^{\circ}\text{F}$ – $109,2\text{ }^{\circ}\text{F}$
- Darbības vide: $10,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $40,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($50,0\text{ }^{\circ}\text{F}$ – $104,0\text{ }^{\circ}\text{F}$) ar relatīvo mitrumu no 20 % līdz 85 %

Strāvas padeve

- Enerģijas avots: 2 x AAA nelādējamās baterijas

Piederumi

- 2 x AAA baterijas: nelādējamās

Serviss

- Divu gadu garantija



Izlaides datums
2017-12-15

Versija: 5.2.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Uzrāda ķermeņa pamata temperatūru

* Avoti: Herzog, L., & Phillips, S. G. (2011). Addressing concerns about fever. Clinical Pediatrics, 50(5), 383–390.

* McCallum, L., & Higgins, D. (2011). Measuring body temperature. Nursing Times, 108(45), 20–2.

* Dažādās vecuma grupās normālas temperatūras diapazons atšķiras. $38,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,4\text{ }^{\circ}\text{F}$) temperatūra ir normāla temperatūra zīdaiņiem.

* Chamberlain, J.M., et al., Determination of Normal Ear Temperature with an Infrared Emission Detection Thermometer, Annals of Emergency Medicine, 1995. g. janvāris, 25. sēj., 15–20. lpp.