



Chytrý teploměr do ucha

- Připojení k aplikaci uGrow
- Rychlý a přesný
- Příjemné a snadno použitelné

SCH740/01

Měří a zaznamenává teplotu dítěte

Přesný, rychlý ušní teploměr připojený k aplikaci uGrow

Chytrý ušní teploměr Philips Avent umožňuje rychle a přesně změřit teplotu a uložit údaje přímo do chytrého zařízení pomocí aplikace uGrow.

Výhody

Připojení k aplikaci uGrow

- Součást řady výrobků s připojením uGrow
- Sledování a lepší porozumění teplotě dítěte
- Připojuje se pomocí technologie Bluetooth® Smart k aplikaci uGrow

Rychlý a přesný

- Stačí jedno stisknutí a za 2 vteřiny máte přesnou hodnotu
- Přesné výsledky $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$

- Červený kroužek na displeji LED pro rychlou indikaci vysoké teploty
- Poskytuje výsledky ve stupních Celsia a Fahrenheita

Příjemné a snadno použitelné

- Navržen pro snadné a pohodlné měření v uchu*

PHILIPS

Vlastnosti

Výrobek s připojením uGrow



Chytrý ušní teploměr Philips Avent se připojuje pomocí naší aplikace uGrow. První zdravotnická aplikace pro děti s připojenými zařízeními, která poskytuje důležité osobní rady. Nechte aplikaci uGrow, aby vám pomohla objevovat vzorce na podporu zdravého rozvoje vašich nejmenších.

Sledování a záznam




Chytrý ušní teploměr Philips Avent rychle a přesně odečítá hodnoty teploty a vytvoří historii tělesné teploty v aplikaci uGrow, kterou můžete snadno sdělit lékaři.

Rychlý



Udržet dítě v klidu dostatečně dlouhou dobu, abyste přesně změřili jeho teplotu, může být náročné. Chytrý ušní teploměr Philips Avent tento problém řeší tak, že je rychlý a snadno se ovládá. Stačí stisknout tlačítko a hodnota je k dispozici do dvou vteřin.

Přesný

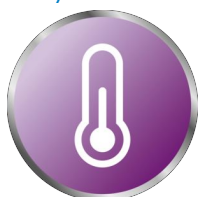

Tělesnou teplotu lze měřit na pěti místech: ústa, ucho, podpaždí, čelo a konečník. Měření v uchu (označované také jako bubínkové měření) a v konečníku je nejpřesnější.* Chytrý ušní teploměr Philips Avent používá měření v uchu k zajištění přesných hodnot, jimiž si můžete být jistí. Náš průzkum ukázal, že tento teploměr zajišťuje měření lékařské třídy s přesností


$\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$ v rozsahu $32,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $42,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($90,3$ až $109,2\text{ }^{\circ}\text{F}$). Ukazuje teplotu uvnitř těla.*

Indikace vysoké teploty



Chytrý ušní teploměr Philips Avent má průzračný displej LCD, takže můžete hned zjistit, zda je teplota normální* nebo zvýšená. Světelný kroužek se zbarví červeně při teplotě nad $38,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,4\text{ }^{\circ}\text{F}$) a vyšší*.

Příjemné a snadno použitelné

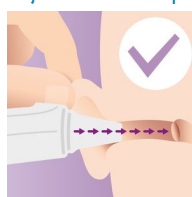

Chytrý ušní teploměr Philips Avent odečte teplotu vašeho dítěte v pár jednoduchých a rychlých krocích. Nejprve se ujistěte, že je snímač čistý a suchý. Pak stisknete tlačítko napájení a jemně zatlačíte ucho dítěte směrem dozadu, aby byl ušní kanálek rovný. Vložte teploměr tak, aby jeho špička směřovala do bubínku a znovu stisknete tlačítko. Teploměr je kompaktní a přímý a jeho špička je vhodná pro děti každého věku.

Stupně Celsia a Fahrenheita



Bez ohledu na to, jakou stupnici používáte, chytrý ušní teploměr Philips Avent vám poskytne výsledky, které potřebujete, na stupnici, které rozumíte.

Připojení k aplikaci uGrow



Chytrý ušní teploměr Philips Avent se připojuje pomocí technologie Bluetooth® Smart k vašemu mobilnímu zařízení. Kompatibilní s těmito zařízeními: iPhone®: verze iOS 8.1 / iPhone® 5s a novější; Android™: Android™ 4.4 KitKat a vyšší.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Synchronizace

Datový přenos
Kompatibilita telefonů

přes Bluetooth® Smart
iPhone 5s+ | iOS 8.1+ | Android 4.4 +

Design

Barva
Rozměry
Čistá hmotnost

White
136 (d) × 34,5 (š) × 57 (h) mm
Přibližně 54,6 g

Snadné použití

Rychlý	Měření za 2 sekundy
Přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita	Ano
Průzračný displej LCD	Ano
Špička snímače pro všechny věkové kategorie	Ano
Samostatné zařízení	Ano, ušní teploměr lze používat jako samostatné zařízení

Technické

Přesnost	$\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{F}$) v rozsahu $32,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $42,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($90,3\text{ }^{\circ}\text{F}$ až $109,2\text{ }^{\circ}\text{F}$)
Rozsah měření	$32,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $42,90\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $90,3\text{ }^{\circ}\text{F}$ až $109,2\text{ }^{\circ}\text{F}$

Provozní prostředí	$10,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $40,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($50,0\text{ }^{\circ}\text{F}$ až $104,0\text{ }^{\circ}\text{F}$) při relativní vlhkosti 20 až 85 %
--------------------	--

Spotřeba

Zdroj napájení	2 x jednorázové akumulátory AAA
----------------	---------------------------------

Příslušenství

2 akumulátory AAA	jednorázové, nedobíjecí
-------------------	-------------------------

Servis

Záruka 2 roky	Ano
---------------	-----

* Uvádí teplotu uvnitř těla

* Zdroje: Herzog, L., & Phillips, S. G. (2011). Addressing concerns about fever. Clinical Pediatrics, 50(5), 383–390.

* McCallum, L., & Higgins, D. (2011). Measuring body temperature. Nursing Times, 108(45), 20–2.

* Normální rozsahy teplot se liší podle věkové skupiny. Hodnota $38,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,4\text{ }^{\circ}\text{F}$) je u kojenců v normálním rozsahu teplot.

* Chamberlain, J.M., et al., Determination of Normal Ear Temperature with an Infrared Emission Detection Thermometer, Annals of Emergency Medicine, January 1995, Vol. 25, pp. 15-20.



Změna údajů vyhrazena
2018, Únor 2

Version: 5.2.1
EAN:

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com